

LATITUDE™ Communicator Patient Literature Supplement Model 6359 USB Cellular Adapter


en

This patient literature supplement applies to Models 6280, 6290, and 6498 Communicators using the cellular data network option to send implanted device data to the LATITUDE Patient Management System.

Model 6359 USB Cellular Adapter is an alternative to the USB cellular adapter shown in your LATITUDE Communicator patient manual and quick start guide. (The patient manual and installation guide for the Model 6498 Communicator do not reference cellular adapters.) The following information applies to Model 6359:

- The “Where to Place Your USB Cellular Adapter” section in your patient manual also applies to Model 6359.
- It is normal for the LED light on the Model 6359 to blink. At times the light may be lit solid.
- A SIM card specific for Communicator use only has been pre-installed in Model 6359. Do not remove or tamper with this SIM card.
- Specifications listed in your patient manual for the USB cellular adapter do not apply to Model 6359. Refer to the specifications provided with Model 6359.

To set up the Model 6359 USB Cellular Adapter with your Communicator, follow the instructions provided with Model 6359 and refer to the figure below.

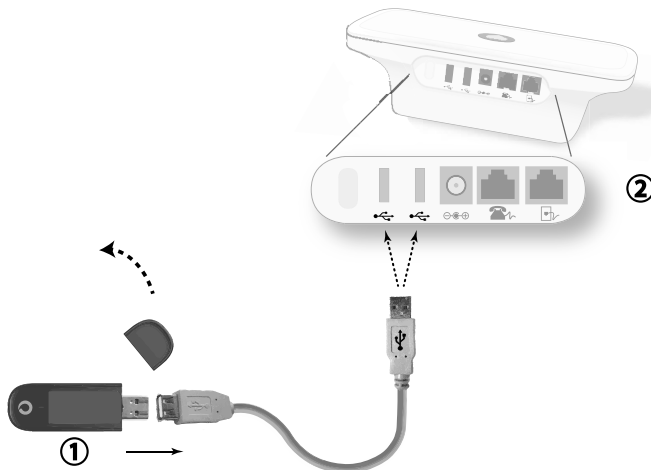

(1) Model 6359 USB Cellular Adapter; (2) Back of Communicator

For additional assistance, contact LATITUDE Patient Services at the phone number listed in your LATITUDE Communicator patient manual.

Apéndice del Manual del Paciente del Comunicador **LATITUDE™** Adaptador USB para móviles, modelo 6359


es

Este apéndice del manual del paciente se aplica a los comunicadores de los modelos 6280, 6290 y 6498 que utilizan la opción de la red de datos móviles para enviar datos del dispositivo implantado al sistema de seguimiento de pacientes LATITUDE.

El modelo 6359 del adaptador USB para móviles es una alternativa al adaptador USB para móviles que se muestra en el manual del paciente y en la guía de inicio rápido del Comunicador LATITUDE. (El manual del paciente y la guía de instalación del comunicador del modelo 6498 no se remite a adaptadores para móviles. La siguiente información se aplica al modelo 6359:

- El apartado “Dónde colocar su adaptador USB para móviles” en el manual del paciente también se aplica al modelo 6359.
- Es normal que la luz LED parpadee en el modelo 6359. A veces, puede quedar encendida fija.
- En el modelo 6359 se ha instalado una tarjeta SIM específica del Comunicador. No la retire ni altere con esta tarjeta SIM.
- Las especificaciones mencionadas en el manual del paciente correspondiente al adaptador USB para móviles no se aplica al modelo 6359. Consulte las especificaciones proporcionadas con el modelo 6359.

Para instalar el adaptador USB para móviles, modelo 6359, con su Comunicador, siga las instrucciones proporcionadas con el modelo 6359 y consulte la siguiente figura.

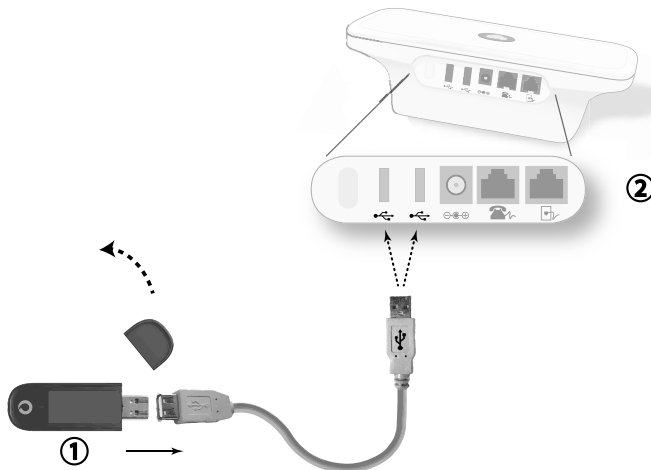

(1) Adaptador USB para móviles, modelo 6359; (2) Parte trasera del Comunicador

Si necesita más ayuda, póngase en contacto con los servicios de atención al paciente de LATITUDE, en los teléfonos indicado en el manual del paciente del Comunicador LATITUDE.

Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

Tel / Tel. 651.582.4000

Medical Professionals / Profesionales sanitarios:

1.800.CARDIAC (227.3422)

Patients and Families / Pacientes y familiares: 1.866.484.3268

www.bostonscientific.com

LATITUDE is a trademark of Boston Scientific Corporation or its affiliates. /

LATITUDE es una marca registrada de Boston Scientific Corporation o sus filiales.

© 2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved. /

© 2017 Boston Scientific Corporation o sus filiales. Reservados todos los derechos.